




Ihr Premium-Partner für professionelle Kühltechnik



# Laborgeräte von GRAM – Mehr Nutzen, weniger Kosten

## Topqualität zu fairen Preisen

GRAM COMPACT 210 und 410 setzen einen neuen Standard für kompakte Kühl- und Tiefkühlschränke. Die Serie ist FKW-frei und der Energieverbrauch macht die Schränke zum absoluten Musterknaben ihrer Klasse.

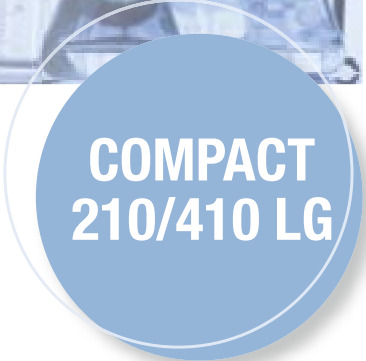

### COMPACT 210/410 LG – passt in die kleinste Lücke



COMPACT 410



COMPACT 210



- Innovatives Umluftsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Außen in Weiß oder Edelstahl (Aufpreis)
- Umweltschonende HFC-Isolierung, 50 mm
- Umweltfreundliches Kältemittel
- Rechts angeschlagene Tür mit Schloss (Glastür werkseitig bestellbar links oder rechts)
- Umschlagbare Tür (ausgenommen Glastürschränke)
- Energiesparende Beleuchtung in der Glastür durch LED-Technologie
- Einfach auswechselbare Türdichtung (ohne Werkzeug)
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Unterbau- und stapelfähig (Serie 210)
- 3 Jahre Vollgarantie

TYP	Kühlschränke		Tiefkühlschränke	
	K 210 LG	K 410 LG	F 210 LG	F 410 LG
Temperaturbereich, °C	+2/+12	+2/+12	-5/-22	-5/-22
Volumen (Liter)	125	346	125	346
Elektr. Anschluss	230V, 50 Hz			
Außenmaße (B x T x H) mm	595 x 640 x 830	595 x 640 x 1875	595 x 640 x 830	595 x 640 x 1875
<b>Energieverbrauch kWh/24h</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>





## Innovation im Detail – GRAM COMPACT LG



### Einzigartiges Luftleitssystem

Dank des GRAM Luftleit-systems gewährleistet der COMPACT eine korrekte und gleichmäßige Temperatur im gesamten Innenraum. Die gekühlte Luft wird über den Luftkanal an der Geräte-rückwand gleichmäßig im Schrank verteilt. Hierdurch wird eine optimale Produktqualität gewährleistet.

### Leichte Reinigung

Leicht zu reinigender Innenraum aus fugenlosem ABS Kunststoff. Die Türdichtung kann zur Reinigung ohne Werkzeug abgenommen werden, bequem und hygienisch.



### Robust und kompakt

Mit kompakten Außenmaßen (60 cm breit und 64 cm tief) beansprucht die COMPACT-Linie nur eine Minimum an Stellfläche. Individuelle Aufstellmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.

### Solide und kippsichere Drahtroste

Die Drahtroste sind in Sicken gelagert, die beim Herausnehmen für Kippsicherheit sorgen. Bei den Geräten der Serie COMPACT 610 werden Wand- und Auflageschienen aus Edelstahl eingesetzt.

### Funktionelles Design

Ergonomischer, integrierter Handgriff über die gesamte Türhöhe.

### Erhöhte Sicherheit

Für die Betriebssicherheit sind Notprogramme integriert.

### Integrierte LED Beleuchtung

Glastürschränke haben integrierte LED Beleuchtung im Türrahmen



Verantwortungsbewusster  
Umweltschutz...